

主な仕様・機能一覧・オプション機能

■ 主な仕様

1日の最大依頼受付数	9,999受付	項目数/1ワークシート	制限なし
検査項目数/1受付	制限なし	報告書登録数	99種類
検査項目登録数	999,999項目	検体フリーコメント	制限なし
セット検査登録数	9,999セット	患者データ保存期間	制限なし(HDD容量に依存)
項目数/1セット	制限なし	検体データ保存期間	制限なし(HDD容量に依存)
依頼元(科病棟)登録数	999,999種類	データチェック機能	パニック値、正常値、前回値
容器登録数	999種類	再検値保存数	制限なし
ワークシート登録数	9,999種類	画像ファイル登録数/1受付	999,999ファイル

■ 機能一覧

検査受付	結果入力	検査状況表示	精度管理
受付登録 依頼紙イメージ受付 検体到着確認	検体別入力 項目別入力 グループ別入力 ワークシート別入力 コメント入力 再検型検体別入力 検体属性一覧入力 画像ファイル入力	未検査表示/リスト 未報告表示/リスト 異常値表示/リスト 該当容器表示/リスト 検査結果状況表示/リスト	コントロール入力 コントロール登録 X-R管理図 ツインプロット管理図 CSVデータ出力
ワークシート		帳票印刷	統計・集計
分析装置ワークシート発行 用手法ワークシート発行 バーコード型ワークシート発行 分析装置ワークシート一括削除		報告書出力 時系列報告書出力 受付台帳 結果台帳 検体ラベル出力 任意バーコードラベル出力 採血指示票出力	件数点数集計表 件数点数集計表(月報) 件数点数集計表(患者別)
オンライン	結果問合せ		ユーティリティ
オンライン指示 進捗状況モニタ 異常値モニタ	データ別一覧表示 患者別一覧表示 ステータス別一覧表示 今回値+前回値表示 時系列表示 時系列グラフ表示 負荷(日内変動)推移/グラフ レーダーチャート		患者属性マスタ編集 CSVデータ出力 検査データバックアップ(自動)
			メンテナンス
			各種マスタメンテナンス

■ オプション機能

■ 顕微鏡画像取込み	■ 電子カルテシステム通信	■ OMR・OCR受付	■ FAX報告
■ 外注検査通信	■ オーダシステム通信	■ 血液像カウンタ	■ 自動報告
■ 健診システム通信	■ Web結果参照システム	■ 尿沈渣カウンタ	

■システム内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。 ■本誌の一部または全部を無断で複製複製(コピー)することは著作権法で禁じられています。

共同開発

 株式会社 **サイズ**

開発元
総販売元

フィンガルリンク株式会社

〒111-0041
東京都台東区元浅草二丁目6番6号東京日産台東ビル5F
TEL：03-6802-7145(代表) FAX：03-6802-7156
E-mail：info@finggal-link.com
Website：www.finggal-link.com

販売元

 株式会社 **サイズ**

Life Science & System's
Finggal Link

臨床検査情報システム



ALCS
Ver 1.2

アルクス は、検査業務の効率化を強力に推進し、医療情報管理や各部門との共有を支援します。

■ 高い信頼性

20年以上に及ぶ臨床検査情報システム開発で培ったノウハウを生かしたシンプルで信頼性の高いシステムです。

■ 快適な操作性

独自の画面設計でどなたでも簡単にご使用いただける快適な操作性を実現しました。

■ 充実した機能

項目マスターの世代管理やTAT機能の搭載など、充実した機能が豊富です。

■ 他システムとの豊富な連携実績

オーダシステム、電子カルテシステムなど上位HISや、外注、健診、透析などの各部門システムなど、さまざまなシステムとの連携実績も豊富です。メーカーにとらわれずスムーズな連携が可能です。


■ 充実したセキュリティ

ユーザー管理、各種操作ログ機能の搭載など、セキュリティの向上を実現しています。

■ 機能向上の継続

継続した機能向上に取り組み、バージョンアップにて提供致します。(※保守契約を結んでいただく必要があります)

進捗状況が一目で分かる"問合せ画面"、患者情報を保持したまま瞬時に各業務間の移動が可能"ワンクリック切替機能"

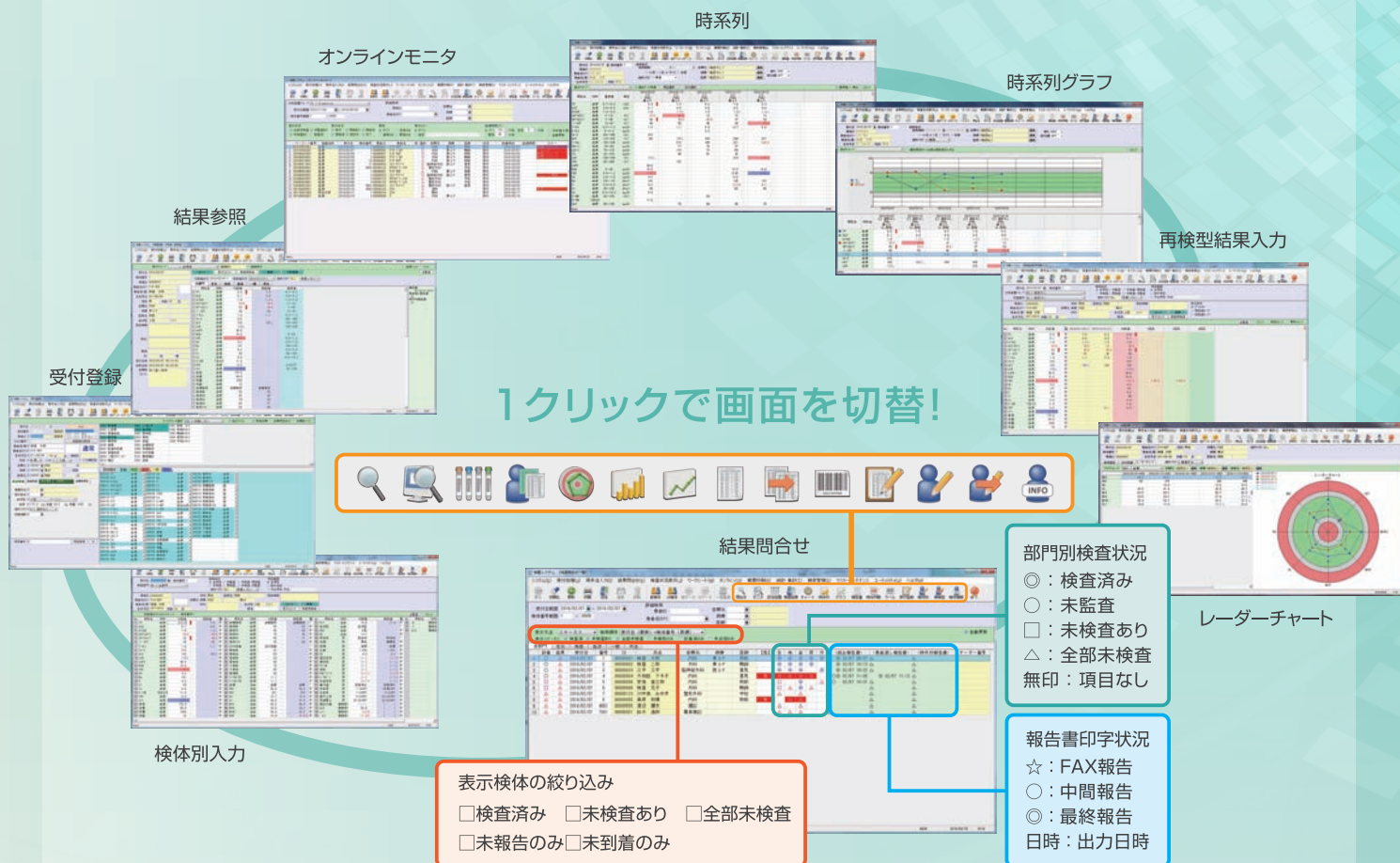



その他の機能(一例)

進捗画面

依頼属性でのソート、作業進捗に応じての絞り込みが、より直感的な操作で行えます。進捗状況のマーク表示が、より多彩になります(再検査状況・測定エラーを簡易表示)。


ソート・絞り込みの状態を「お気に入り保存」、いつでも呼び出し可能です。

緑のタイルを左クリックで絞り込み解除。絞り込み実施中の列が 白色になります。右クリックで絞り込み 条件を変更します。

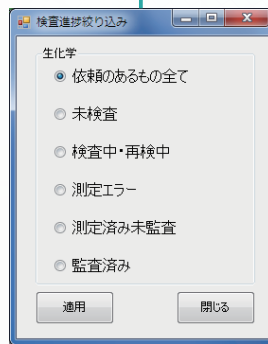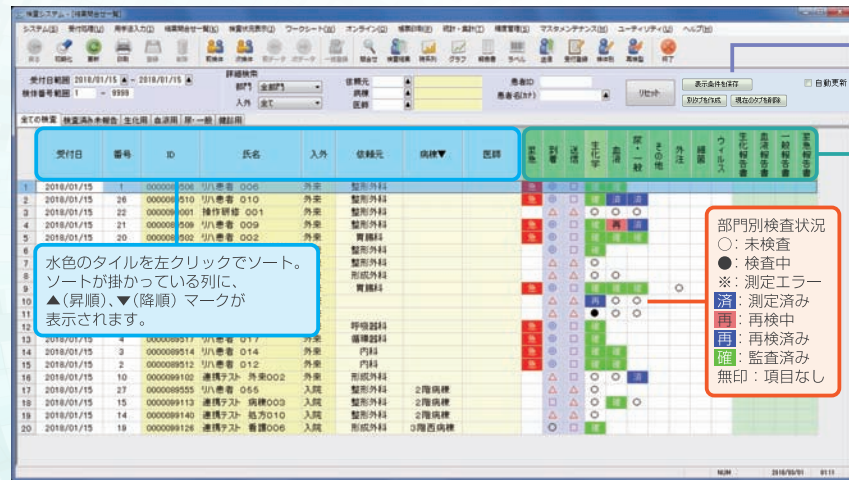

精度管理

X-R管理図やツインプロットに対応しています。精度管理グラフを1画面で同時に表示可能です。

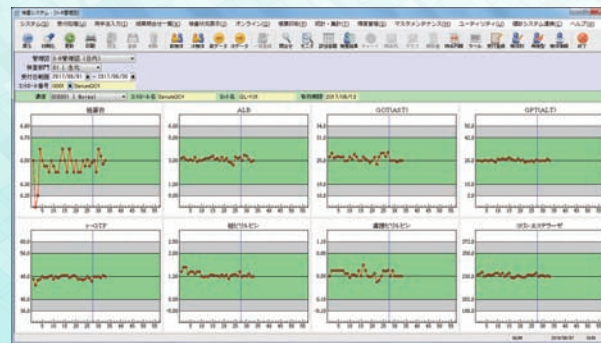


TAT 情報出力

受付、検体到着、測定完了、上位送信、再検査時間など、各工程の時間を記録し、CSV ファイル出力が可能です。

画像管理

蛋白分画の波形や血液のヒストグラム、顕微鏡画像など、各種画像データを取り込み管理可能です。

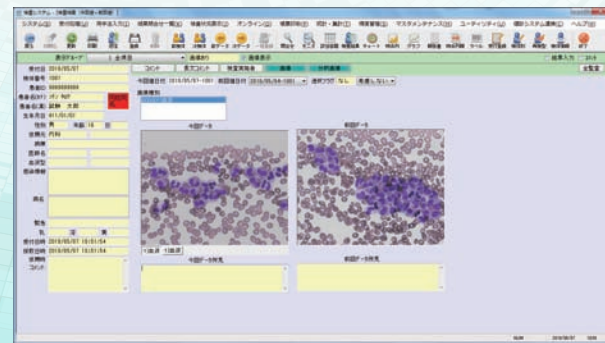

データ抽出

特定条件のデータ抽出など、様々な条件でデータ抽出が可能です。データの有効な2次利用が可能です。

多彩な報告書レイアウトに対応可能

患者渡し報告書

基準値プロット報告書

時系列報告書